

MB

MONOBLOCK
implant



C-TECH
IMPLANT

TAVOLA DEI CONTENUTI

MB - IMPIANTO MONOBLOCK

Caratteristiche dell'impianto	page 04
Impianti dentali	page 05
Componenti protesiche	page 06
Componenti del kit chirurgico	page 07



Tutti i materiali prodotti da C-TECH seguono una procedura validata, che include il trattamento di superficie e l'imballaggio, in conformità con le direttive europee e internazionali EN ISO 13485:2003 / AC:207 E 93/42/ CEE relative ai dispositivi medici.



SOLUZIONI DI PRECISIONE DENTALE

C-Tech Implant è una società dinamica con una forte crescita, che produce componenti e linee di prodotti principalmente per l'implantologia dentale.

PRESENZA INTERNAZIONALE

La produzione e gestione si trovano in Italia, C-Tech Implant è però attiva in tutti i mercati mondiali ed è distribuita in oltre 20 paesi.

RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGIA AVANZATA E SEMPLIFICAZIONE

C-Tech Implant si differenzia ponendo grande attenzione alla ricerca e all'applicazione delle ultime tecnologie ai suoi prodotti, il tutto mantenendo una semplicità di inserimento e la facilità d'uso.

C-Tech Implant interpreta le più recenti tendenze implantologiche modificandole per farle divenire soluzioni chirurgiche e protesiche pratiche finalizzate ad offrire al professionista e al paziente un risultato ottimale.

STANDARD DI QUALITÀ ELEVATA A PORTATA DI MANO

Gli impianti C-Tech sono realizzati secondo i più alti standard in materia di produzione e gestione dei programmi europei di componenti mediche e odontoiatriche.

Verifiche e certificazioni continue assicurano che tali standard siano mantenuti.

FORMAZIONE E CONSIGLI

Professionisti del settore dentale sono assistiti dalle conoscenze e dall'esperienza del personale C-Tech che organizza corsi e sessioni di formazione. Durante questi corsi il professionista è in grado di apprendere i più recenti metodi di inserzione degli impianti e di riabilitazione.


OBIETTIVI

L'obiettivo di C-Tech Implant è di fornire il massimo livello di qualità, prodotti tecnologicamente avanzati a prezzi ragionevoli in modo da permettere al dentista di trovare soluzioni per la più ampia gamma di pazienti.



MONOBLOCK implant

L'impianto C-TECH MB, impianto monoblock, presenta 2 diverse opzioni protesiche, così come 2 differenti design nel corpo in modo da incontrare i diversi requisiti in base alle densità ossee di mascella e mandibola.

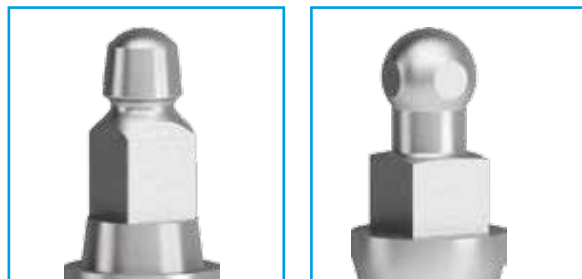

Scelta fra testa tonda o quadrata

La testa quadrata, con un'altezza di 4.8 mm sopra la piattaforma protesica offre un'ottima struttura per la protesi

La piattaforma protesica ampia 3.1 mm offre una base di supporto ideale per la protesi

Il collare liscio dell'impianto MAN-OB/ MAN-TAP offre una platform switching adatta a contenere il tessuto gengivale della mandibola

Microfiletto più alto adatto alla maggiore altezza corticale dell'osso in mandibola

La filettatura sottile dell'impianto MAN-OB/ MAN-TAP offre una resistenza minore quando si inserisce l'impianto nell'osso D1/D2, largamente presente nella zona mandibolare

Superficie trattata con sabbatura e acidificazione

Apice appuntito per facilitare l'avanzamento nell'osso D1/D2



La testa tonda è compatibile con le componenti o-ball delle linee SD, GL E BL.

Il collare liscio più alto dell'impianto MAX-OB/ MAX-TAP è perfetto per i tessuti molli più alti della mascella.

Il microfiletto dell'impianto MAX-OB/ MAX-TAP è più basso per adattarsi meglio alle inferiori altezze corticali presenti in mascella.

Il filetto dell'impianto MAX-OB/ MAX-TAP, più aggressivo, è pensato per una migliore stabilità nell'osso più morbido della mascella.

Scanalatura apicale antirotazionale

Apice arrotondato

IMPIANTI DENTALI

MANOB



- Testa o-ball
- Collare ridotto per la mandibola
- Microfiletto per la zona corticale della mandibola
- Spira fine
- Apice appuntito

CODICE PRODOTTO

9 mm	MANOB-09
11 mm	MANOB-11
13 mm	MANOB-13
15 mm	MANOB-15

MAXOB




- Testa o-ball
- Collare per i tessuti molli della mascella
- Microfiletto per la zona corticale della mascella
- Spira aggressiva
- Apice arrotondato

CODICE PRODOTTO

9 mm	MAXOB-09
11 mm	MAXOB-11
13 mm	MAXOB-13
15 mm	MAXOB-15

MANTAP

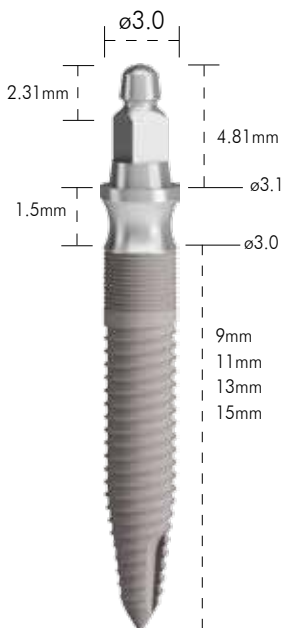


- Testa quadra
- Collare ridotto per la mandibola
- Microfiletto per la zona corticale della mandibola
- Spira fine
- Apice appuntito

CODICE PRODOTTO

9 mm	MANTAP-09
11 mm	MANTAP-11
13 mm	MANTAP-13
15 mm	MANTAP-15

MAXTAP

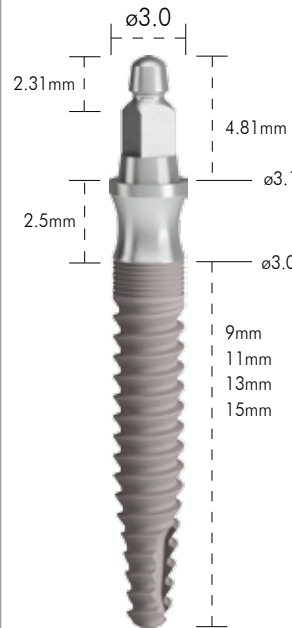

- Testa quadra
- Collare per i tessuti molli della mascella
- Microfiletto per la zona corticale della mascella
- Spira aggressiva
- Apice arrotondato

CODICE PRODOTTO

9 mm	MAXTAP-09
11 mm	MAXTAP-11
13 mm	MAXTAP-13
15 mm	MAXTAP-15

COMPONENTI PROTESICHE

PROTESI PER IMPIANTI O-BALL



MCH-1
Ritenzione bassa



MCH-2
Ritenzione media



MCH-3
Ritenzione alta



MC-3005B
MC-3005B/10
MC-3005B/25

O-ring (5 pezzi)
O-ring (10 pezzi)
O-ring (25 pezzi)



MC-3005
MC-3005/10
MC-3005/25

O-ring (5 pezzi)
O-ring (10 pezzi)
O-ring (25 pezzi)



MC-3013
Cappetta temporanea



MC-3014
Cappetta per impronta



MC-3007
Analogo

PROTESI PER IMPIANTO A TESTA QUADRA



MB-3013
Cappetta per impronta



MB-3014
Cappetta temporanea



MB-3006
Cappetta transfer e calcinabile



MB-ANALOG
Analogo

SCHEMA DELLE SCELTE PROTESICHE



MANOB

MAXOB



MANTAP

MAXTAP



MC-3007
Analogo con collare



MB-ANALOG
Analogo testa quadra



MCH-1

MC-3005B



MCH-2

MC-3005



MCH-3



MC-3013



MC-3014



MB-3013



MB-3014



MB-3006

KIT CHIRURGICO

CHIAVE A FARFALLA



Ref. MC-3002

KIT CHIRURGICO

MC-00075SC



FRESE



CT-2020
Fresa lanceolata



CT-1720E
Fresa Ø 2.0



ND-1726E
Fresa Ø 2.6



ND-1730E
Preparatore di spalla



CT-2000
Allungatore
chirurgico

MUCOTOMO



TCP - 3mm
Mucotomo

MONTATORI



MC-3003S
Corto



MC-3003M
Medio



MC-3003L
Lungo

CALIBRO OSSEO



MC-3015

CRICCHETTO



Ref. MC-00376

CRICCHETTO DINAMOMETRICO



Ref. CT-8010

C-TECH
CENTURY IMPLANT TECHNOLOGIES

Via Santa Margherita al Colle n. 18 - 40136, Bologna - ITALY
Tel. +39 051 6661817 - Fax +39 051 6667071
www.c-tech-implant.com - info@c-tech-implant.com