

VITAPAN PLUS®

Informazione prodotto / Tabella forme



VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 02.11

VITA shade, VITA made.

VITA


Disponibili in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)
e VITA classical A–D
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).



VITAPAN PLUS® A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.

Il progresso è la somma di esperienze e novità. All'insegna di questa massima VITA ha modernizzato e riconfigurato il classico dente VITAPAN in funzione delle future esigenze. Questo vale soprattutto per il perfezionamento delle caratteristiche anatomiche. Il nuovo VITAPAN PLUS è la perfetta simbiosi tra estetica e funzione.

VITAPAN PLUS conferma inoltre l'impegno della VITA a soddisfare le richieste dei laboratori odontotecnici ottimizzando continuamente i processi nell'ambito dei metodi di lavorazione abituali. Tutto ciò rappresenta per voi un guadagno di sicurezza, di soddisfazione del cliente e di prospettive future. Perché nel suo complesso VITAPAN offre ora altri PLUS.

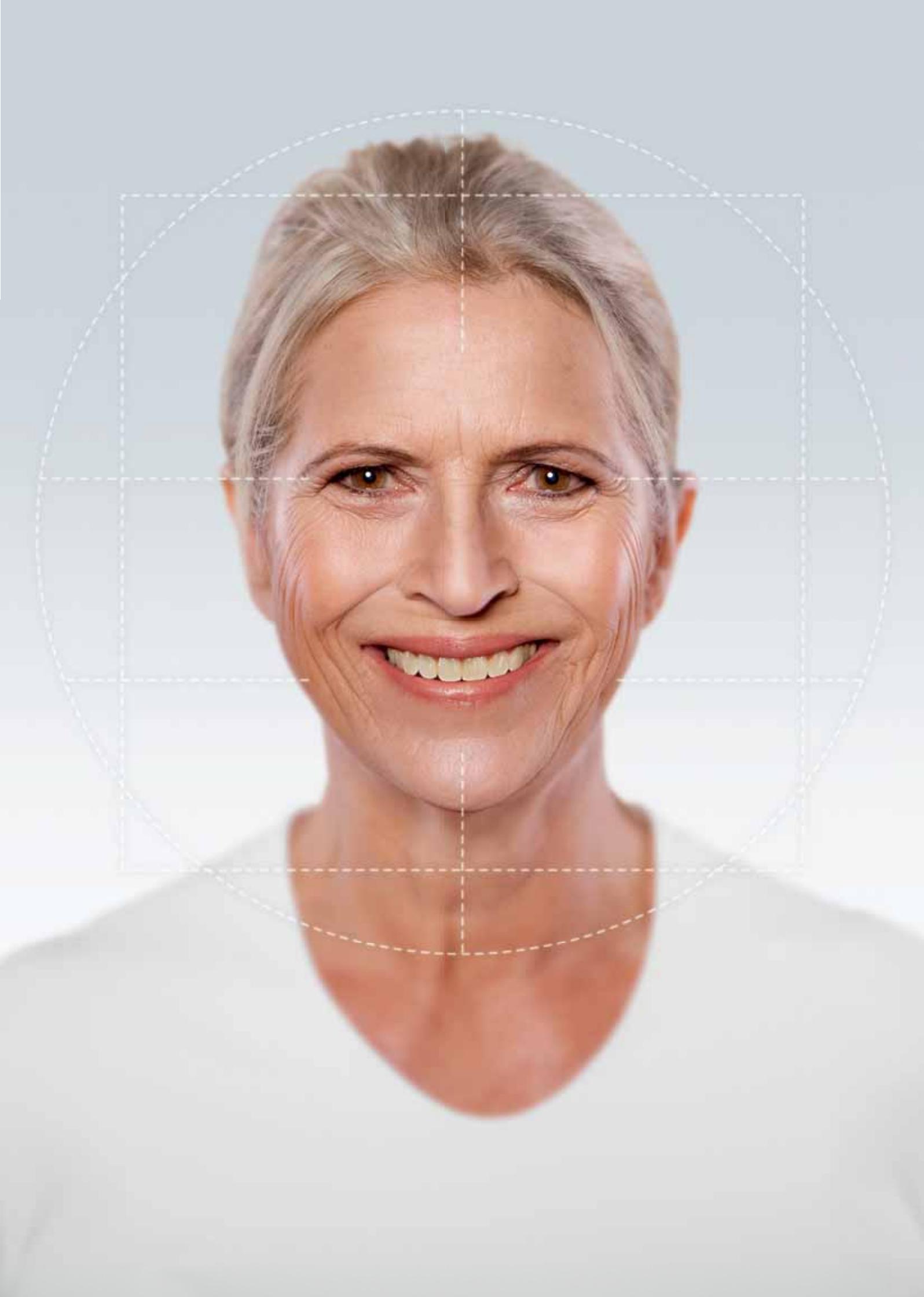

VITAPAN PLUS® In forme nuove come richiesto dagli odontotecnici di tutto il mondo.

„Innovazioni convincenti, che ampliano le possibilità di montaggio.“

„Evoluzione coerente e molto ben riuscita.“

„Anatomia eccellente con caratteristiche identiche al modello naturale.“

„Estetica straordinaria grazie all'andamento dello smalto e all'effetto di profondità dei colori.“

„Tessitura superficiale e stratificazione ne fanno un avvenimento.“



Testati in più di 10 paesi da oltre 300 partecipanti ai workshop. Con oltre il 90% di risposte positive.

„VITAPAN PLUS mi offre la risposta alla crescente pressione per una maggiore efficienza. Per me una vera pietra miliare.“

„VITAPAN PLUS rappresenta per me una nuova generazione di riabilitazioni multifunzionali e di forma compiuta.“

„Aree cervicali ben sviluppate per una configurazione delle papille conforme all'età e favorevoli all'igiene.“

„Contenimento ragionato del numero di forme in distribuzione razionale.“

VITAPAN PLUS® A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.



Morfologia superficiale realistica e struttura individualizzata dei mammelloni

 per una riflessione vitale della luce

Opalescenza, luminescenza e traslucenza

 per un gioco cromatico ricco di sfumature

Bordi incisali bianchi

 per un'estetica identica al modello naturale

VITAPAN PLUS® A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.



Caratteristiche di bombatura orizzontale e verticale



per un sostegno efficace delle labbra e la conservazione della fisionomia individuale



Configurazione naturale delle superfici palatali



per la conservazione della fonetica e dell'abituale sensazione linguale



Angoli pronunciati



per un risultato convincente sotto l'aspetto di naturalezza ed estetica

Configurazione delle liste marginali labiali funzionale alla tipologia



per sottolineare l'individualità del paziente



Colletti leggermente allargati con passaggio privo di gradini tra area cervicale e coronadentaria



per una grande versatilità: grazie all'andamento individualizzato in altezza dei denti, ogni forma offre diverse possibilità di configurazione delle protesi in funzione dell'età




per una modellazione gengivale ricca di sfaccettature, funzionale all'età e rispettosa dell'igiene con una chiusura interdentale sicura



per una configurazione degli spazi interdentali ben proporzionata con una buona copertura degli eventuali elementi costruttivi.

VITAPAN PLUS® Assortimento compatto, con versatilità ottimizzata

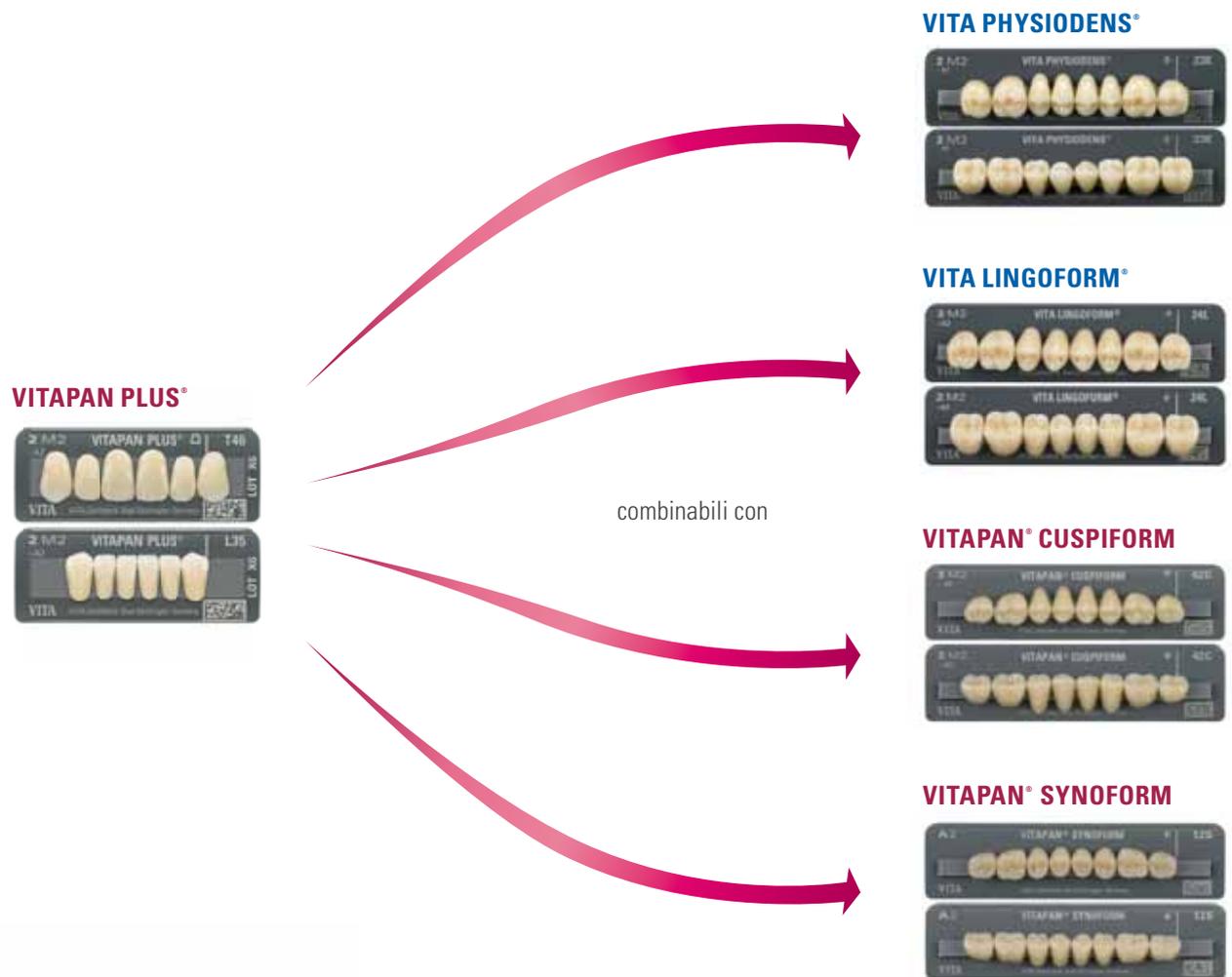

Colore

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

(con migliore equivalenza
VITA classical A1-D4)

VITA classical A1-D4

Tipo

Forma

(definisce la larghezza
approssimativa della fila)




Nr. lotto

In chiaro


Data Matrix Code

CE 0124 sul retro

VITAPAN PLUS® Anteriori superiori

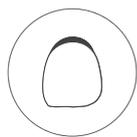

Ovali

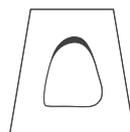

Triangolari

041



T44



045



T46



047




T47



051



T48

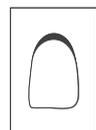

Rettangolari

R47



R49




VITAPAN PLUS® Anteriori inferiori e tabella delle combinazioni

L33



L35

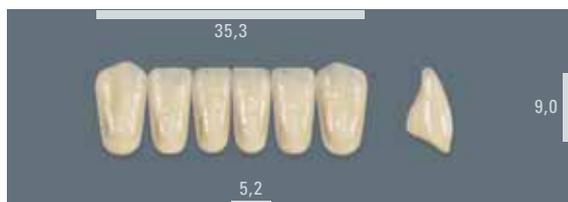

L37



L39




L41



Nr.	 mm		 mm	Nr.	
O41	41,3	9,1	7,4	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
O45	45,1	10,3	8,4	L35 35,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
O47	47,3	10,8	8,6	L37 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 3,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
O51	51,4	11,9	9,3	L41 41,2	45C 14S 24E 24L 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
T44	44,1	9,9	8,1	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
T46	46,2	10,4	8,2	L35 35,3	42C 13S 23E 22L 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
T47	46,9	10,9	8,5	L37 37,3	42C 13S 22E 22L 31,7 31,3 32,9 31,6 33,4 33,9 33,7 32,1
T48	48,1	11,3	8,7	L37 37,3	42C 14S 23E 22L 31,7 33,1 33,5 31,6 33,4 35,4 34,6 32,1
R47	47,0	11,2	8,6	L37 37,3	42C 13S 23E 22L 31,7 31,3 33,5 31,6 33,4 33,9 34,6 32,1
R49	49,1	11,7	8,9	L39 39,0	45C 14S 23E 23L 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 34,6 34,8

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.

VITAPAN PLUS® Della miglior sostanza

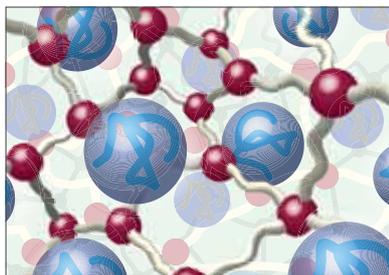

-  Perle PMMA, inturgidite da monomero
-  Monomero reticolato
-  Sostanza di carica inorganica inglobata nel reticolo per polimerizzazione



VITAPAN® VITAPAN PLUS® VITA PHYSIODENS® VITA LINGOFORM®

Denti in materiale MRP – utilizzato con successo in milioni di casi

- estetica eccezionale
- lavorazione sicura
- affidabile nell'uso
- qualità del materiale superiore – gli unici denti costituiti **in tutto lo spessore da materiale omogeneamente microcaricato** e che si contraddistinguono per un'eccezionale resistenza all'abrasione.


Nel materiale **MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic)** sviluppato da VITA microparticelle di sostanza di carica inorganica con una distribuzione ottimale della granulometria vengono inglobate per polimerizzazione nella reticolo polimerico.

Questo garantisce caratteristiche omogenee e di elevata qualità in tutto lo spessore del dente.

Inoltre con il speciale processo di produzione NPV (processo di pressatura di compensazione) sviluppato da VITA, unico nel suo genere, si realizza **una stratificazione omogenea a tutto spessore, che si distingue per l'intimo legame tra colletto, dentina e smalto – costituiti tutti dallo stesso materiale.**

Dalla struttura chimica deriva inoltre un'elevata caricabilità meccanica – che si tratti di riabilitazioni supportate da mucose o da impianti.

VITA MRP – Valori di abrasione eccellenti

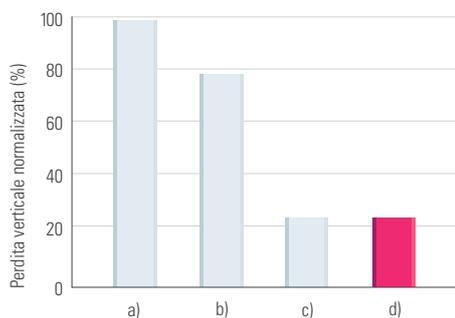

- a) PMMA reticolato
- b) PMMA altamente reticolato
- c) Composito a carica nano/nano-ibrida
- d) VITA MRP

Fonte: Indagine in vitro sull'usura
Università Regensburg, Germania

Caratteristiche

- resistenza all'abrasione superiore
- rispetto dei tessuti e resistenza al deposito di placca
- lavorazione senza scheggiature e senza perdite qualitative per quanto riguarda colore e materiale
- lucidabilità eccellente – anche dopo il molaggio in bocca
- legame ottimale con i materiali per basi di protesi

Effetti

- lunga durata della protesi
- elevata biocompatibilità ed eccezionale confort d'uso
- in presenza di idonei presupposti perfettamente indicati per riabilitazioni su impianti
- rapida accettazione della riabilitazione da parte del paziente

Vantaggi

- sicurezza del processo di produzione
- pazienti completamente soddisfatti
- rafforzamento dell'immagine di studio e laboratorio

Colori



VITA SYSTEM 3D-MASTER®									
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4M2	5M1
~B1	~B2	~A1	~A2	~C2/D4	~B3	~A3/D3	~A3,5	~A4	~C4



VITA classical A1-D4									
A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	C2	D3	D4

Indicazioni


- Protesi totale
- Protesi su impianti
- Lavori con attacchi
- Scheletrati
- Lavori telescopici e conometrici

Assortimenti*	
Campionario vivente in astuccio di alluminio, più colori	10 anteriori superiori + 5 anteriori inferiori x 6
Magazzino denti 1S	48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6
Magazzino denti 2S con posteriori LINGOFORM®:	48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6 24 posteriori superiori + 24 posteriori inferiori x 8
Magazzino denti 2S con posteriori VITAPAN® CUSPIFORM	48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6 24 posteriori superiori + 24 posteriori inferiori x 8
Magazzino denti Vario VITAPAN®, S:	(134 file)
Magazzino denti Vario VITAPAN PLUS®, M:	(267 file)
Magazzino denti Vario VITAPAN PLUS®, L:	(400 file)

*Per informazioni dettagliate sulle specifiche dei magazzini Interpellate Il responsabile di zona VITA o il vostro deposito concessionario.

Questa linea di prodotti è disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1-D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali VITA 3D-MASTER e VITA classical.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

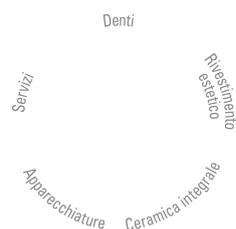

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. Data di questa informazione per l'uso: 02.11.

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed i seguenti materiali sono marcati  0124:

VITAPAN PLUS®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

In Italia:

VITA ITALIA SPA
Via A. Volta 83
20090 Cusago (Milano)
Tel.: 02 9039261 · fax 02 90392640/43