

# VITA MFT

Multi Functional Teeth

Sales Information




VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 10.08

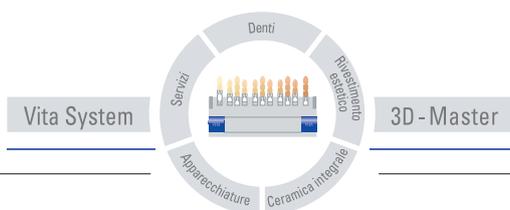

**VITA**

Disponibili nell'esclusiva colorazione  
VITA SYSTEM 3D-MASTER

# VITA MFT Il dente per tutte le indicazioni

Multi Functional Teeth

## Nuovi parametri con VITA MFT



Codice a barre e CE 0124 sul retro

- Indicato per tutti gli utilizzatori – montaggio semplice, efficiente e sicuro
- Uso universale – un dente per tutte le indicazioni
- Gamma di colori e forme ottimizzate per un'elevata redditività
- VITA SYSTEM 3D-MASTER e "VITAPAN classical più vicino" per una scelta mirata del colore

## Vantaggi competitivi



- Anatomia armoniosa per una protesi fedele all'originale
- Stratificazione naturale che assicura vitalità del gioco cromatico
- Elevata reticolazione e assenza di monomero residuo per un'eccellente biocompatibilità
- Resistenza alla formazione di crepe e all'abrasione per una lunga durata

## VITA MFT Nuova semplicità di montaggio

Multi Functional Teeth



### Principi funzionali

#### **Superfici labiali convesse per un sostegno mirato delle labbra**

Gli anteriori leggermente convessi sostengono e favoriscono l'armonia dento-facciale e un'estetica naturale.

#### **Area cervicale leggermente allargata negli anteriori e posteriori**

L'area cervicale leggermente allargata negli anteriori e posteriori agevola la configurazione delle zone interdentali in funzione dell'estetica e dell'età.



#### **Configurazione naturale delle superfici palatali per una fonetica naturale**

La configurazione altamente naturale degli anteriori consente ad ogni paziente di conservare capacità fonetiche e sensazione linguale abituali.

#### **Cavità basale**

La cavità basale consente una significativa riduzione dei lavori di molaggio ed incrementa la superficie per un legame sicuro con il materiale per basi di protesi.



#### **easy-centric® per un'identificazione sicura dell'occlusione**

La configurazione armoniosa dei denti agevola una montaggio professionale e razionale – sia per l'odontotecnico esperto che per chi inizia.

#### **Rilievi occlusali preabradi minimizzano le forze di spinta**

La configurazione ottimale delle cuspidi agevola il posizionamento statico ideale della protesi. Questo è di particolare importanza per le riabilitazioni su impianti.



# VITA MFT Esigenze elevate, massima efficienza

Multi Functional Teeth

## Colori

VITA SYSTEM 3D-MASTER							
							
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L2.5	3M2	3R2.5	4M2
(~ B1)*	(~ B2)*	(~ A1)*	(~ A2)*	(~ B3)*	(~ A3)*	(~ A3.5)*	(~ A4)*

\* Colore VITAPAN classical più vicino

## Forme

- 4 forme anteriori superiori – triangolari
- 3 forme anteriori superiori – ovali
- 3 forme anteriori superiori – rettangolari
- 2 forme anteriori superiori – quadrate
- 5 forme anteriori inferiori (1x Long Neck)
- 3 forme posteriori superiori
- 3 forme posteriori inferiori



## Indicazioni

- Protesi totale
- Protesi su impianti
- Protesi telescopica e conica
- Protesi con attacchi
- Protesi scheletrata
- Protesi di riabilitazione

# VITA MFT Convincenti in tutto

Multi Functional Teeth



Tabelle forme da parete/ da tavolo, campionari viventi, confezioni, informazioni prodotto; manuale d'uso, tabelle forme, pagine pubblicitarie

## **Informazione prodotto**

- Le informazioni essenziali su VITA MFT per l'odontotecnico

## **Manuale d'uso**

- Informazioni generali sulla protesi ed in particolare sull'uso di VITA MFT: utili linee guida per esperti e per chi inizia

## **Tabella forme**

- Gamma di colori e forme VITA MFT, tabelle di combinazione, presentazioni

## **Poster**

- VITA MFT in un colpo d'occhio


## **Campionario vivente**

- Contiene tutte le file VITA MFT – ideale per la scelta dei denti insieme al paziente

## **Pagine pubblicitarie**

- Strumenti per una comunicazione efficace sulle riviste

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

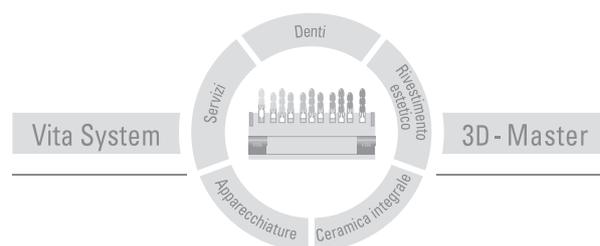

Avvertenza: I nostri prodotti sono stati sviluppati per il settore dentale e vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. La rappresentazione ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti.

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati  0124 : **VITAMFT**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline : Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

In Italia: DELLATORRE-VERA SPA  
Viale A. Volta 83 · 20090 Cusago  
Tel. 02/9039261 · Fax 02/9039264-43  
[info@dellatorrevera.it](mailto:info@dellatorrevera.it)